

Anleitungsnummer:951645

Vielen Dank für Ihren Kauf

Zur ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung der Waage lesen Sie sich diese Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig durch.

Artikelnummer: 219999



**ELEKTRONISCHE
PERSONENWAAGE**

BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE DATENECHNISCHE DATEN

Ausgestattet mit hochpräzisem
Dehnmessstreifen-Sensorsystem
Belastbarkeit bis zu 150kg (330lb)
hochwertige natürliche Bambusplattform
1,8"/46mm großes hochauflösendes
rotes LED-Display
Mindestgewicht: 8kg

Auto-Reset
Auto-ein/aus
Batterie schwach/Überlastungs-Anzeige
Gewichtseinheit: kg-lb
Energieversorgung: 4x 1,5V AA Batterien
(nicht enthalten)

GEBRAUCHSANWEISUNG



- Stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche (bevor Sie sich auf Teppichböden wiegen, fügen Sie bitte die vier Füße unter der Waage ein, um Genauigkeit zu gewährleisten)
- Steigen Sie vorsichtig auf die Waage, bis das Gewicht auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Waage schaltet sich ungenutzt nach 8 Sekunden automatisch aus.

Bitte überprüfen sie Ihr Gewicht bei leichten Schwankungen erneut


FUNKTIONEN

FEHLERMELDUNGEN



Batterie schwach-Anzeige

Zeigt der Bildschirm das Kürzel "Lo" an, schaltet sich die Waage nach zwei Sekunden automatisch aus. Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die Batterien unter Beachtung der Polung.

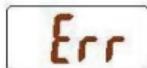

Überlastungs-Anzeige


Ist die Waage überlastet (über 150kg), zeigt der Bildschirm das Kürzel "Err" an.

UNIT



EINHEIT WECHSELN

Öffnen Sie das Batteriefach bevor Sie sich wiegen und betätigen Sie den kleinen Knopf nahe der Öffnung, um zwischen Kilogramm und Pfund zu wechseln.

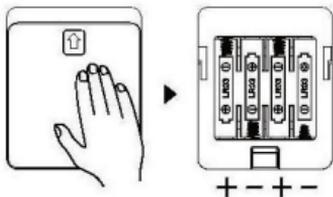

EINSETZEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach in Richtung des Pfeils. Setzen Sie vier 1,5V AA-Batterien wie abgebildet ein. Nach dem Einlegen der Batterien setzen Sie den Deckel auf und schieben ihn rückwärts. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass inkorrektes Einsetzen der Batterien dauerhafte Beschädigung der Elektronik bewirkt.

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE

01. Legen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche für genaue Ergebnisse.
02. Die Waage ist stoßempfindlich. Lassen Sie sie nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen, dies könnte sie leicht beschädigen.
03. Halten Sie die Balance während Sie sich wiegen, versuchen Sie nicht zu schwanken.
04. Bitte benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um die Waage zu reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse eindringen.
05. Verwenden Sie keine Chemikalien, um die Waage zu reinigen.
06. Um eine lange Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, setzen Sie sie keiner Nässe oder Hitze aus.
07. Verwenden Sie die Waage nicht zu gewerblichen Zwecken.
08. Überlasten Sie die Waage nicht, sonst wird der Sensor beschädigt.
09. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage wenn sie nicht benutzt wird.
10. Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Bitte entfernen Sie die Batterien wenn Sie die Waage längere Zeit nicht nutzen oder transportieren.
12. Zeigt die Waage keine Reaktion bei korrekter Verwendung, überprüfen Sie die Batterien und stellen Sie sicher, dass Sie noch funktionieren und richtig eingesetzt sind.
13. Wegen ständiger Verbesserungen verzichtet wird darauf, Sie über etwaige Änderungen dieser Hinweise zu informieren.
14. Bitte springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage, da sie ein hochpräzises elektronisches Gerät ist.
15. Verwenden Sie die Waage nicht auf nassem und rutschigem Boden und stellen Sie sich nicht auf die Kante der Waage, um Stürze zu vermeiden.